



DESIKUS VARIOSYSTEM

Verwendbar für alle gängigen Desinfektionsmittel- u. Seifenflaschen 500 – 1000 ml



Abb. oben. DESIKUS Modell UTE
mit Fronthebelbedienung

Unabhängigkeit beim Einkauf von Desinfektionsmitteln durch variables Aufnahmesystem passend für alle gängigen Flaschen und Dispenser!

Sekundenschneller Wechsel von Flaschen und Einmal-Dispensern!

Genormtes Bohrbild, alte Spender abnehmen - Desikus anschrauben

Keine Wiederaufbereitung erforderlich

Zeitersparnis des Hygienemanagements

Verstellbarer Flaschenhalter

Für Wand, Stative und Normschienen

HÄNDE DESINFIZIEREN – MACH MIT!

Senken Sie Ihre Kosten mit unserem Hygienekonzept!

Die Aufbereitung von Pumpen bedeutet einen erheblichen Zeit- und Personalaufwand. Laut Studien dauert die Aufbereitung der Pumpen von Desinfektions- Spendern (inkl. Sterilisation, Laufwege, Demontage und Montage) ca. 18 Minuten.

Ein großes Klinikum verwendet 1000 – 1500 Desinfektions-Spender, somit ist eine Umsetzung der Hygieneanforderung hinsichtlich der Pumpenaufbereitung schwer realisierbar.

Unser DESIKUS Variosystem, geeignet für alle handelsüblichen Desinfektionsflaschen, bietet eine Lösung zu diesem Problem.

Abb. rechts
SPENDER DESIKUS SR mit seitlichem Bedienhebel, platzsparend, maximale Tiefe nur 14,5 cm.



DESINFEKTIONSMITTEL - SPENDER

Desinfektionsmittel-Spender Modell Ute

Desinfektionsmittel- und Seifenspender mit Wandplatte, mit Bedienhebel inkl. Verdrehschutz für Dispenser und verstellbarem Aufnahmekorb für Euronormflaschen. Diese einfache und platzsparende Version findet überall dort Anwendung, wo eine schnelle und unkomplizierte Hygiene gewährleistet sein muss. Besonders **ideal in Krankenhausfluren**, da keine abstehenden langen Hebel und Schalenhalter in den Raum ragen. Eine Behinderung oder ein Verletzungsrisiko durch versehentliches Anstossen wird dadurch nahezu ausgeschlossen. Standardausführung in Eloxal silbergrau.



Abb. oben

Desinfektionsspender **Modell Ute** ohne bzw. mit Abtropfschale, Tiefe maximal 21 cm (mit Abtropfschale)



DESINFEKTIONSMITTEL-SPENDER Modell Ute für Wandmontage

Standardausführung in Eloxal silbergrau, mit Verdrehschutz und verstellbarem Aufnahmekorb aus V2A, elektropoliert, geeignet

für Flaschengröße **500 ml** ohne Abtropfschale und Bügel

Best. Nr. 52300

für Flaschengröße **1000 ml** ohne Abtropfschale und Bügel

Best. Nr. 52301

Optional gegen Aufpreis lieferbar in Eloxal rot oder blau

Best. Nr. 52327

Techn. Daten: Ausführung: Korpus aus Aluminium, eloxiert silbergrau, Maße: Breite 8 cm, Höhe 31 cm, Tiefe mit Hebel 17 cm, Gewicht: 500 g

Abtropfschale mit Bügel

Best. Nr. 54415

Bügel einzeln


Best. Nr. 54413

Abtropfschale einzeln

Best. Nr. 54412

Sekundenschnell Flaschen wechseln - große Zeitersparnis mit

DESIKUS VARIOSYSTEM DESINFEKTIONSMITTEL-SPENDER

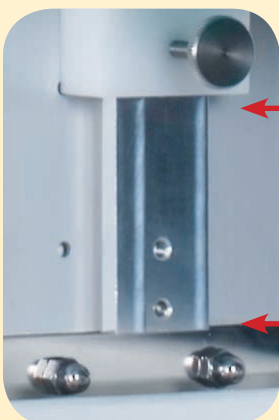

verstellbar
bis 40 mm



Die Abbildungen oben zeigen die durch den höhenverstellbaren Aufnahmemechanismus sekundenschnelle Adaption verschiedener Flaschengrößen und Pumpenköpfe

Aufnahmekorb in 2 Größen erhältlich: für 500 ml und 1000 ml Flaschen! (Abb. oben 2. v. re.)

Aufnahmekorb einzeln, für Desinfektionsflasche **500 ml**, inkl. Aufnahmeeinheit

Best. Nr. 52305

Aufnahmekorb einzeln, für Desinfektionsflasche **1000 ml**, inkl. Aufnahmeeinheit

Best. Nr. 52306

DESINFEKTIONSMITTEL - SPENDER

Desinfektionsmittel-Spender DESIKUS Seitlich SR / SL

Desinfektionsmittel- und Seifenspender mit abgewinkelter Wandplatte, mit seitlichem Bedienhebel wahlweise nach **rechts (SR)** oder **links (SL)** ausgerichtet inkl. Verdrehenschutz für Dispenser und verstellbarem Aufnahmekorb für Euronormflaschen. Sehr platzsparende Version bei beengten räumlichen Verhältnissen, **ideal in Krankenhausfluren und Patientenzimmern**. Durch den höhenverstellbaren Aufnahmekorb können **unabhängig vom Hersteller** alle gängigen Desinfektionsflaschen verwendet werden. Ganz **individuell** können die Spender auch mit 1000ml-Flaschen bestückt werden. Standardausführung in Eloxal silbergrau.



Abb. links

Desinfektionsspender **DESIKUS SR** mit Abtropfschale

Abb. rechts

Bequemer und schneller Flaschenwechsel
Freier Zugang für Dispenserwechsel
Einzelteile austauschbar



DESINFEKTIONSMITTEL-SPENDER DESIKUS SR / SL für Wandmontage
Standardausführung in Eloxal silbergrau mit Verdrehschutz u. verstellbarem Aufnahmekorb

Optional gegen Aufpreis lieferbar in Eloxal rot oder blau

Techn. Daten: Maße: Breite 21 cm, Tiefe maximal 14,5 cm, Höhe 32 cm, Gewicht: 750 g

Best. Nr. 52327



Große Signalwirkung für Besucher durch Ausführung in silbergrau, rot oder blau gegeben. Glatte Oberflächen lassen eine einwandfreie Wischdesinfektion zu.



Ergonomischer Bedienhebel



Verdrehenschutz für Dispenser

Abb. rechts

einheitliches Bohrbild passend für die meisten in Kliniken verwendeten Desinfektionsspender.

Einfach die alten Spender abschrauben und in den gleichen Bohrungen ULF Systems Desikus anschrauben!



DESINFEKTIONSMITTEL-SPENDER DESIKUS SL, Standardausführung in Eloxal silbergrau und verstellbarem

Aufnahmekorb aus V2A elektropoliert, geeignet für

Flaschengröße 500 ml ohne Abtropfschale und Bügel

Flaschengröße 1000 ml ohne Abtropfschale und Bügel

Best. Nr. 52330

Best. Nr. 52332

DESINFEKTIONSMITTEL-SPENDER DESIKUS SR, Standardausführung in Eloxal silbergrau und verstellbarem

Aufnahmekorb aus V2A elektropoliert, geeignet für

Flaschengröße 500 ml ohne Abtropfschale und Bügel

Flaschengröße 1000 ml ohne Abtropfschale und Bügel

Best. Nr. 52331

Best. Nr. 52333

Abtropfschale mit Bügel Best. Nr. 54415

Bügel einzeln Best. Nr. 54413

Abtropfschale einzeln Best. Nr. 54412

DESINFEKTIONSMITTEL - SPENDER FÜR STATIVE, INFUSIONSSTÄNDER UND NORMSCHIENEN



Für Stative
Best. Nr. 52311



Für Normschiene
Best. Nr. 52312

DESINFEKTIONSSPENDER DESIKUS Modell UTE ST

für 500 ml Flaschen, mit Kloben Maxi **Best. Nr. 52311**

für Rundrohre bis Ø. 35 mm, ohne Abtropfschale und Bügel

Dto. für 1000 ml Flaschen **Best. Nr. 52313**

DESINFEKTIONSSPENDER DESIKUS Modell UTE N

für 500 ml Flaschen, mit Kloben für Normschiene **Best. Nr. 52312**

25 x 10 mm, ohne Abtropfschale und Bügel

Dto. für 1000 ml Flaschen **Best. Nr. 52314**

Techn. Daten: Korpus aus Aluminium, eloxiert silbergrau,
Maße: Breite 8 cm, Höhe 31 cm, Tiefe Korpus mit Hebel: 17 cm,
mit Abtropfschale 21 cm, Gewicht 600 bzw. 800 g

Optional lieferbar komplett rot oder blau. Best. Nr. 52327



Abb. Links
Desikus Modell
UTE ST oder N
Sekundenschnell
an Stativ oder Norm-
schiene montiert.

Abb. unten.
Abtropfschale m. Bügel
Abtropfschale einzeln
Bügel einzeln

Best. Nr. 54415
Best. Nr. 54412
Best. Nr. 54413

Maße: B 14 cm, L 18 cm, H 4 cm



SETZEN Sie ein optisch deutliches Zeichen mit ULF Systems Wandtafeln (Abb. unten)

Hygiene ist in Ihrer Umsetzung auch von der persönlichen Wahrnehmung abhängig. Binden Sie Ihre Besucher stärker in Ihr Hygienemanagement ein und erwecken Sie mit farbigen Alufolien mehr Aufmerksamkeit! **Vorhandene** Desinfektionsspender fast aller Hersteller können auf die Wandtafeln geschraubt werden, auf Wunsch auch mit Abtropfschale. Die Montage erfolgt in Sekundenschnelle.



Abb. oben links: Wandtafel Modell SIGNAL
aus Aluminium ohne Desinfektionsspender, ohne
Abtropfschale und Bügel, für vorhandene Spender,
Standardausführung in Eloxal silbergrau, Maße:
B 25 cm, T 30 cm, Stärke 4 mm. **Best. Nr. 54350**

Optional gegen Aufpreis lieferbar
in Eloxal rot oder blau **Best. Nr. 52328**

Abtropfschale mit Bügel **Best. Nr. 54415**

Abb. oben rechts: Schrifttafel aus Alu für vorhandene
Desinfektionsspender, mit Aufschrift :


HÄNDE DESINFIZIEREN. MACH MIT!

Wischdesinfektionsfest. Standardausführung in Eloxal silbergrau,
Maße: B 12 cm, Höhe 5 cm, Stärke 3 mm, **Best. Nr. 52355**

Optional gegen Aufpreis lieferbar
in Eloxal rot oder blau

Best. Nr. 52356

Garantie: 3 Jahre

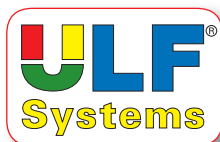

Böhm Medical

Hauptplatz 7
A-3452 Heiligeneich
office@boehm-medical.at www.boehm-medical.at

Tel.: 02275/ 20005
Fax.: 02275/ 20006

Technische Änderungen vorbehalten.
Geringe Farbabweichungen sind möglich.

CE-gezeichnet.
Eingetragene Warenzeichen
ULF SYSTEMS Nr. 39976274
DE10201411917181 zum Patent angemeldet